

Guia de Informação

Semi-Máscara Respiratória Tipo - FFP2

Destinado à utilização por profissionais de saúde e doentes (nível 1)
Este produto é um equipamento de proteção individual (EPI).



| | |
|--------------------------|---|
| Fabricante | Novavet |
| Endereço | Rua Arquitecto Viana de Lima nº 67, 5300-678 |
| Cidade | Bragança, Portugal |
| Marca Comercial | Bemed |
| Registo ASAE | - |
| Ano de Fabrico | 2021 |
| Cor | Branco |
| Dimensões/Tamanho | 156 x 107mm/ Único |
| Número do Produto | 1153247 |
| Modelo | 5 Camadas TNT, Autofiltrante |
| Classificação do Produto | EPI - CLASSE FFP2 BFE ≥94% |
| Material | Elástico 5x400mm, Clip de Arame Duplo Revestido 105x3mm, sem Látex |
| Normas e Directivas | Testes e certificados de conformidade com a norma EN 149:2001+A1:2009 e Regulamento (UE) 2016/425, Regulamento N° 14-E/2020 |

Composição



Imagem meramente ilustrativa

Spun-Bond (30g/m²)
Hot-Air-Cotton (50g/m²)
Melt-Blown (25g/m²)
Melt-Blown (25g/m²)
Spund-Bond (30g/m²)

2

Logística



720 unidades de máscaras

72 caixas de 10 unidades

Informação Adicional



As Temperaturas aplicáveis variam entre 5-50°C
Humidade relativa <80%



Recomenda-se trocar de máscara a cada 8 horas



Prazo de validade 2 anos

Instruções de Uso

Semi-máscaras filtrantes para proteção contra partículas – FFP2 — contra agentes biológicos de risco grupo 2, conforme a norma EN 149:2001+A1:2009, tipo FFP2. Filtra pelo menos 94% das partículas do ar.

Máscara protege o usuário de respingos de gotículas, infecções e líquidos contaminantes no meio ambiente.

Ajuste nasal flexível e acolchoado que garante um bom ajuste facial; facilidade na colocação e remoção;



1. Antes de colocar a máscara, lave as mãos com água e sabão.
2. Cubra a boca e o nariz e verifique se não há espaços entre o rosto e a máscara.
3. Remova a máscara pelos elásticos. (não toque na frente da máscara)
4. Substitua a máscara por uma nova assim que esta estiver húmida e não reutilize a máscara.



Information Guide

Respiratory Semi-Mask Type - FFP2


Intended for use by healthcare professionals and patients (level 1)
This product is an Personal protective equipment (PPE).



Image merely illustrative


| | |
|---------------------------------|---|
| Manufacturer | Novavet |
| Adress | Rua Arquitecto Viana de Lima nº 67, 5300-678 |
| City | Bragança, Portugal |
| Trade mark | Bemed |
| Regulation ASAE | - |
| Year of manufacture | 2021 |
| Color | White |
| Dimensions/Size | 156 x 107mm/Single |
| Product Number | 1153247 |
| Model | 5 Ply, Self-Filtering |
| Product Classification | EPI - CLASSE FFP2 BFE ≥94% |
| Material | 5 TNT Layers, Double Coated Wire, Recycled Polyamide |
| Standards and Directives | FFP2 Non Reusable particle filtering half mask without valves according to EU standard EN 149:2001+A1:2009, Regulation N° 14-E/2020 |

Composition

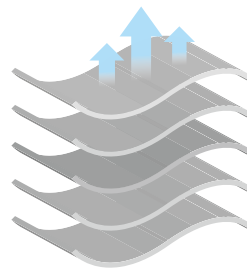

| |
|--------------------------------------|
| Spun-Bond (30g/m ²) |
| Hot-Air-Cotton (50g/m ²) |
| Melt-Blown (25g/m ²) |
| Melt-Blown (25g/m ²) |
| Spund-Bond (30g/m ²) |

Logistics

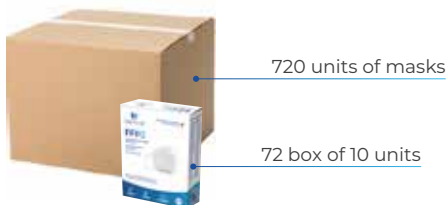

additional Information



Applicable
Temperatures
vary between 5-50°C
Humidity
relative <80%



Recommended to
change mask
every 8 hours



Expiration date
2 years

instructions For Use

Filter half-masks for protection against particles - FFP2 - against biological risk agents group 2.

The mask protects the user from spills of droplets, infections and contaminating liquids in the environment.

Filters at least 94% of airborne particles.



1. Before putting on the mask, wash your hands with soap and water.
2. Cover mouth and nose with mask and make sure there are no gaps between your face and the mask.
3. Remove the mask by the elastic bands. (don't touch the front of the mask).
4. Replace the mask with the new one as soon as it is damp and do not re-use single-use masks.



Guía de información

Tipo de semimáscara respiratoria - FFP2


Destinado a pacientes y profesionales sanitarios (nivel 1) Este producto es un equipo de protección individual (EPI).

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fabricante | Novavet |
| Dirección | Rua Arquitecto Viana de Lima nº 67, 5300-678 |
| Ciudad | Bragança, Portugal |
| Marca Comercial | Bemed |
| Registro ASAE | - |
| Año de Fabricación | 2021 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones / Tamaño | 156 x 107mm/ Único |
| Número de Producto | 1153247 |
| Modelo | 5 capas TNT, Autofiltrado |
| Clasificación del producto | EPI - CLASE FFP2 BFE ≥ 94% |
| Material | Elástico 5x400 mm, clip de alambre de doble revestimiento 105x3 mm, sin látex |
| Normas y directivas | Ensayos y certificados de conformidad con la norma EN 149: 2001 + A1: 2009 y el Reglamento (UE) 2016/425, Reglamento no 14-E / 2020 |



Imágenes solo para fines ilustrativos

Composición

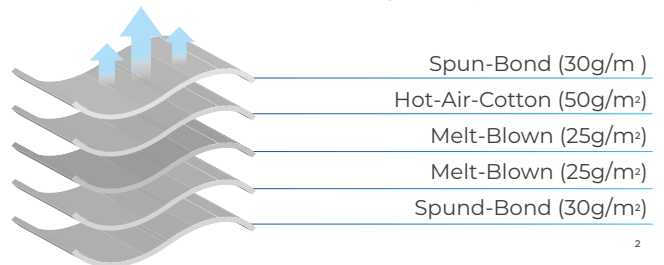

2

Logística



Información Adicional



Temperaturas aplicables varían entre 5-50°C
Humedad relativa <80%



Se recomienda cambiar su mascarilla cada 8 horas.



Período de validez 2 años

Instrucciones de uso

Máscaras filtrantes de protección contra partículas - FFP2 - contra agentes de riesgo biológico grupo 2, según norma EN 149: 2001 + A1: 2009, tipo FFP2. Filtra mínimo el 94% de las partículas de aire.

La máscara protege al usuario de salpicaduras de gotas, infecciones y líquidos contaminantes en el medio ambiente.

Ajuste nasal flexible y acolchado que garantiza un buen ajuste facial; facilidad de colocación y extracción;



1. Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón.
2. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya espacios entre la cara y la mascarilla.
3. Retire la máscara por las bandas elásticas. (no toque el frente de la máscara)
4. Reemplace la mascarilla por una nueva tan pronto como esté mojada y no reutilice la mascarilla.



Guide d'information


Type de masque semi-respiratoire - FFP2

Destiné à être utilisé par les professionnels de santé et les patients (niveau 1) Ce produit est un équipement de protection individuelle (EPI).



| | |
|-----------------------------|--|
| Fabricant | Novavet |
| Adresse | Rua Arquitecto Viana de Lima n° 67, 5300-678 |
| Ville | Bragança, Portugal |
| Marque déposée | Bemed |
| Enregistrement ASAE | - |
| Année de fabrication | 2021 |
| Couleur | blanc |
| Dimensions / taille | 156 x 107mm/ Seul |
| Numéro de produit | 1153247 |
| Modèle | 5 couches TNT, auto-filtrant |
| Classification des produits | EPI - CLASE FFP2 BFE ≥ 94% |
| Matériel | Elastique 5x400 mm, clip en fil double couche 105x3 mm, sans latex |
| Normes et directives | Enseignes et certificats de conformité à la norme EN 149: 2001 + A1: 2009 et au règlement (UE) 2016/425, règlement n ° 14-E / 2020 |

composition

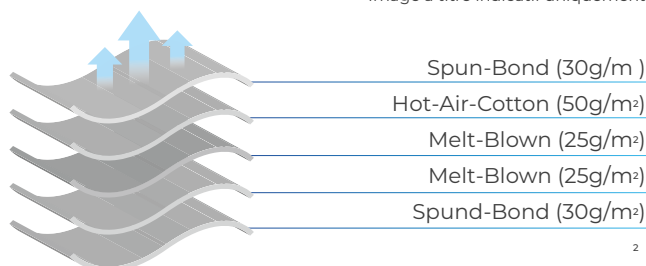

Logistique



Informations Complémentaires



Températures applicables varient entre 5 et 50 ° C d'humidité relative <80%



Il est recommandé de changer de masque toutes les 8 heures



Date d'expiration 2 années

Mode d'emploi

Demi-masques filtrants de protection contre les particules - FFP2 - contre les agents à risques biologiques du groupe 2, selon la norme EN 149: 2001 + A1: 2009, type FFP2. Filtre au moins 94% des particules d'air.

Le masque protège l'utilisateur des éclaboussures de gouttelettes, des infections et des liquides contaminants dans l'environnement.

Ajustement nasal flexible et rembourré qui garantit un bon ajustement du visage; facilité de mise en place et de retrait;



1. Avant de mettre le masque, lavez vos mains avec du savon et de l'eau.
2. Couvrez la bouche et le nez et vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre votre visage et votre masque.
3. Retirer le masque par les bandes élastiques. (ne touchez pas l'avant du masque).
4. Remplacez le masque par un nouveau dès qu'il est humide et ne réutilisez pas le masque.

